

Remplir, emballer et partir

5mm



un remplissage
d'implantation allant
jusqu'à 5 mm

Photopolymérisation
LED 20 sec.



“ Cela fait à présent trois ans que j'utilise **aura bulk fill**. La résine sort lisse sans revenir en arrière et polymérise fortement. Le vernis est incroyable est mes composites précédents n'ont jamais été aussi bons. Les caractéristiques sont idéales pour n'importe quelle restauration, dents primaires ou permanentes. J'ai recommandé ce produit à un grand nombre d'associés et j'envisage de continuer à utiliser l'**aura bulk fill** comme mon principal composite.

Dr Liel Grinbaum, DMD

SDI

Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

aura bulk fill
Matériau réparateur, ultra universel

aura bulk fill



Une nuance. Un remplissage.

Restaurations rapides et simples en composite sur postérieures.

- Finition d'aspect naturel avec une seule nuance universelle
- Polymérisation profonde sans avoir besoin d'une couche de couronnement
- Mise en place aisée en quelques secondes
- La consistance cireuse est compacte et non collante pour optimiser la manipulation



The Dental Advisor, Vol. 33,
No. 07, September 2016

2.21%

Faible contraction volumétrique

aura bulk fill présente une contraction réduite pour donner des restaurations durables.

115 MPa

Excellente résistance à la flexion

aura bulk fill résiste à d'importantes déformations sans se fracturer.

375 MPa

Forte résistance à la compression

aura bulk fill résiste à d'importantes forces de compression dans la bouche.


Profondeur de la polymérisation

L'opacité d'aura bulk fill est une fonction de la différence dans l'index de réfraction de ses deux composants, le matériau de remplissage et la résine.

Le processus de polymérisation altère légèrement l'index de réfraction de la résine, afin de correspondre à l'index de réfraction du matériau de remplissage.

Ceci réduit temporairement l'opacité, en permettant une pénétration plus profonde pour une grande profondeur de polymérisation.

Après la polymérisation, l'index s'écarte à nouveau pour atteindre l'opacité idéale pour la finition brillante, façon caméléon, d'aura bulk fill.

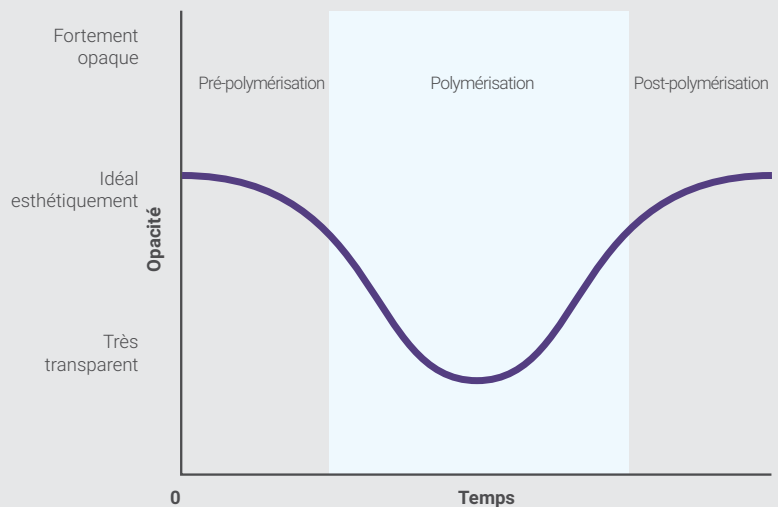

AVANT



APRÈS

Dr. Bob Lowe (USA)



AVANT



APRÈS

Dr. Gregor Thomas (Germany)

// 8565012 Bulk Fill 20 x 0.25g Recharges complètes // 8560012 Bulk Fill 1 x 4g Recharges seringue



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

